

Teilbarkeit von Tabletten – Teil 2: ABDA-Datenbank



Viele Patienten benötigen zur korrekten Dosierung ihrer Medikamente Tabletten, die in zwei oder mehrere gleiche Teile geteilt werden können. Wenn ein Arzt anruft und nach einer teilbaren Tablette mit einem bestimmten Wirkstoff für eine Verordnung fragt, ist eine Suche direkt in der ABDA-Datenbank das ideale Werkzeug. Lesen Sie hier, wie Sie mit Hilfe des optionalen Moduls **IXOS Artikel Info Profi** schnell das passende Arzneimittel für den Patienten finden.

Rufen Sie im Menü **Beratung** die **ABDA-Datenbank** auf.

Artikelbezeichnung	Form	Stärke	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	Status
HCT 1A PHARMA 25MG TABL	TAB	100St N3	06453257	1A Pharma G.	5,00	16,02	
HCT AAA 25MG TABLETTEN	TAB	100St N3	01672492	AAA - PHAR	5,00	16,02	
HCT ABZ 25MG	TAB	100St N3	07260388	AbZ-Pharma	5,00	16,02	
HCT ACTAVIS 25MG TABLETTEN	TAB	100St N3	07572254	PUREN Pharm	5,00	16,02	
HCT AL 25MG TABLETTEN	TAB	100St N3	07333710	ALIUD Pharm	5,00	16,02	
HCT BETA 25	TAB	100St N3	00580351	betapharm A	5,00	16,02	11
HCT - CT 25MG	TAB	100St N3	07519863	AbZ-Pharma	5,00	16,02	
HCT DEXCEL 25MG	TAB	100St N3	07745996	Dexcel Pharm	5,00	16,02	
HCT GAMMA 25	TAB	100St N3	02003014	Wörwag Pha	5,00	16,02	11
HCT HEXAL 25MG	TAB	100St N3	00271874	HEXAL AG	5,00	16,02	11
HCT RATIOPHARM 25MG TABL	TAB	100St N3	01550398	RATIOPHARM	5,00	16,02	

Doppelklicken Sie auf **Deutsche FAM** und geben Sie im Reiter **Arzneimittel** im Feld **Stoffbezeichnung** den benötigten Wirkstoff ein, hier zum Beispiel Hydrochlorothiazid.

Handelsname:

Anbieter:

Stoffbezeichnung: hydrochlorothiazid

ATC-Code (WHO):

... Suchwort:

Indikations-Schlüssel:

... Suchwort:

Darreichungsform:

Abgabeform:

Anwendungsform:

Applikationsweg:

ATC-Code (deutsch):

... Suchwort:


Standardhinweise:

Textfragmentsuche:


Aktuelle Verknüpfung: und oder nicht

Verknüpfung	Kriterium	Suchkriterium	Treffer	Treffer gesamt


Es öffnet sich das Stoffauswahl-Fenster, in dem Sie den gewünschten Wirkstoff zu Ihrem Suchbegriff auswählen können – bei manchen Substanzen gibt es z. B. unterschiedliche Salzverbindungen. Mit **Typ/Stärke auswählen – F3** können Sie neben dem Wirkstoff auch die gewünschte Wirkstärke festlegen. In unserem Beispiel wählen wir 25 mg und bestätigen die Auswahl mit **OK – F12**.

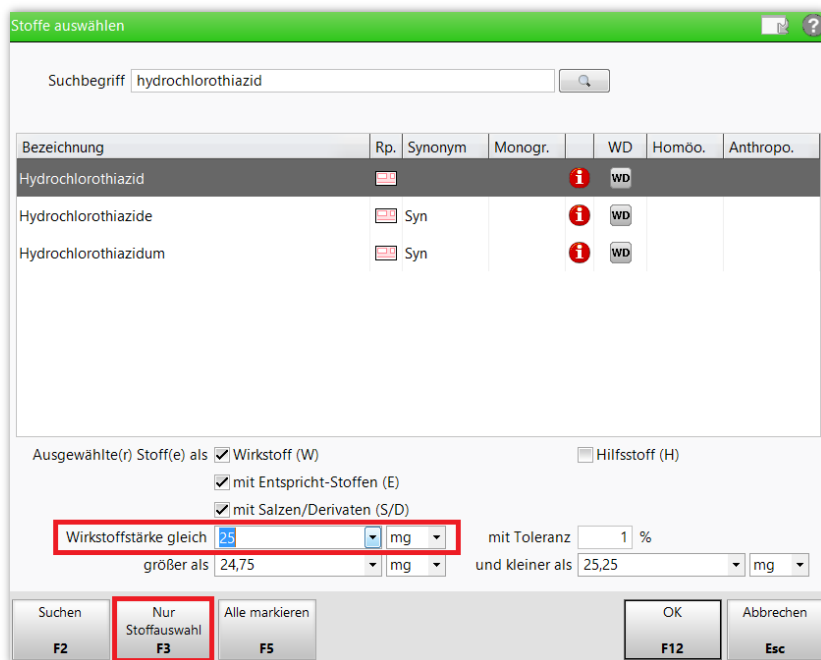

In den Rechercheergebnissen im unteren Teil des Bildschirms können Sie nun die Treffer zu Ihrer Suche sehen. Um die Teilbarkeit als Kriterium hinzuzufügen, finden Sie im Reiter **Zusatzinformationen** das Dropdown-Menü **Teilbarkeit**.

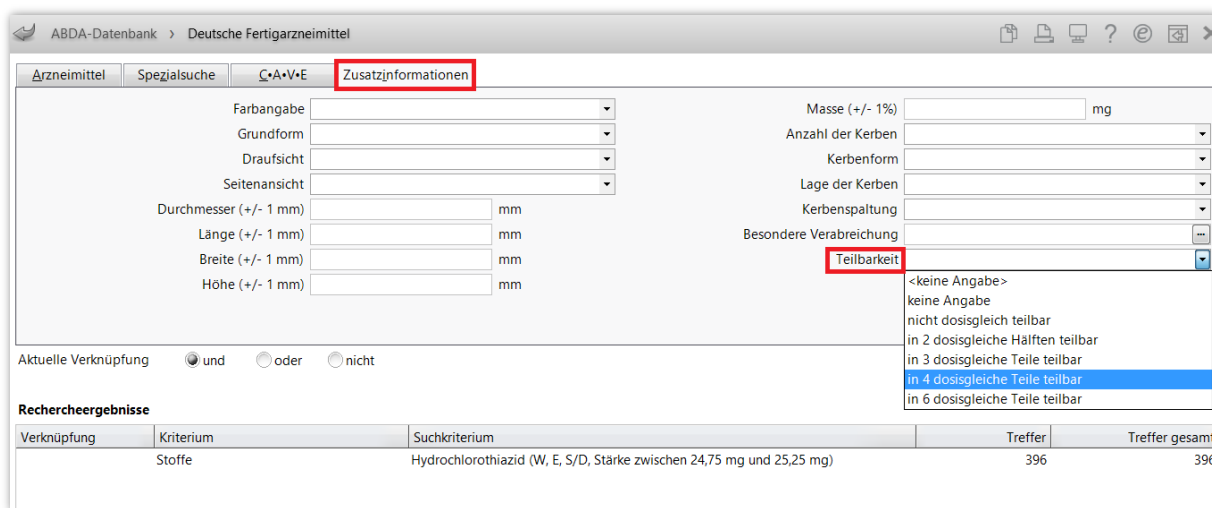

In diesem Fall suchen wir nach Präparaten, die *beide* eingegebenen Kriterien (Wirkstoff und Stärke, Teilbarkeit in vier Teile) erfüllen.

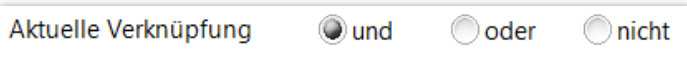

Durch Auswählen der Verknüpfungsoptionen „oder“ bzw. „nicht“ kann man stattdessen nach Präparaten suchen, die nur mindestens eines der angegebenen Kriterien erfüllen (**oder**), oder auch Kriterien ausschließen (**nicht**). Dazu wählt man zuerst die gewünschte Verknüpfung an und gibt dann das betreffende Kriterium ein.

Nach Auswahl der gewünschten Teilbarkeitsoption wird die Ergebnisliste auf die verbleibenden passenden Arzneimittel reduziert.

Mit **Trefferliste anzeigen – F12** werden die Ergebnisse übersichtlich aufgelistet.

The screenshot shows the search interface with various filters. The 'Teilbarkeit' filter is selected. The search results table is as follows:

Verknüpfung	Kriterium	Suchkriterium	Treffer	Treffer gesamt
und	Stoffe	Hydrochlorothiazid (W, E, S/D, Stärke zwischen 24,75 mg und 25,25 mg)	396	396
	Teilbarkeit	in 4 dosisgleiche Teile teilbar	553	9

The 'Trefferliste anzeigen F12' button is highlighted in the bottom right corner of the interface.

Sie können nun die erhaltene Liste bei Bedarf mit **Filter – F6** noch weiter reduzieren, z. B. die maximale Anzahl der Wirkstoffe auf „1“ setzen, um nur Monopräparate anzuzeigen.

Wählen Sie schließlich aus der Liste einen geeigneten Vorschlag für das Arzt- oder Patientengespräch aus oder übernehmen Sie die Auswahl in die **Taxe-Ansicht – F12**.

The screenshot shows the 'Trefferliste' with 9 results. The 'Filter F6' and 'Taxe-Ansicht F12' buttons are highlighted in the bottom right corner.

Artikelbezeichnung	Darreichungsform	Anbieter	Rp.	WD	C+A+V+E
Benazepril HEXAL comp 20mg/25mg	Filmtabletten	HEXAL AG		WD	C+A+V+E
Benazepril-1A Pharma comp 20mg/25mg	Filmtabletten	1A Pharma GmbH		WD	C+A+V+E
Captopril HCT Sandoz 50/25mg	Tabletten	Hexal AG	A _V	WD	C+A+V+E
HCT AL 25mg	Tabletten	ALIUD Pharma GmbH		WD	C+A+V+E
HCT HEXAL 25mg	Tabletten	HEXAL AG		WD	C+A+V+E
HCT Sandoz 25mg	Tabletten	Hexal AG	A _V	WD	C+A+V+E
HCT STADA 25mg	Tabletten	STADAPharm GmbH		WD	C+A+V+E
HCT-Actavis 25mg	Tabletten	PUREN Pharma GmbH & Co. KG	A _V	WD	C+A+V+E
HCT-beta 25	Tabletten	betapharm Arzneimittel GmbH		WD	C+A+V+E