

Kommissionierer: Auslagerungsschacht für Kontakte festlegen

Kommissionierautomaten sparen viel Zeit im Apothekenalltag.

Im Backoffice-Bereich entfällt das Einsortieren von großen Teilen der gelieferten Ware in Schubladen, auch Prozesse wie Retouren und Inventuren werden vereinfacht.



In der Offizin kann das Beratungsgespräch unterbrechungsfrei durchgeführt werden, da die benötigten Arzneimittel mit Hilfe des Automaten direkt am Arbeitsplatz bereitgestellt werden.

Mit IXOS können Sie die Ausgabe aus dem Kommissionierer bei besonderen Kunden auch individuell regeln: der Auslagerungsschacht lässt sich für einzelne Kunden, Heime oder ihre Untereinheiten separat festlegen.

Wie das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel.

Zuordnung beim Kunden

Um einem bestimmten Kunden einen speziellen Auslagerungsschacht zuzuordnen, öffnen Sie die **Kontakte** (Menü **Beratung**), suchen den Kunden heraus und wählen **Kontakt-details – F8**.

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefon
Müller	Annehild	24.11.1985	21483	Juliusburg	+49/(0)4531/58
Müller	Ellie	05.02.2006	81477	München	
Müller	Hildegart	20.11.1943	19273	Melkof	+49/(0)4545/27
Müller	Joel	25.09.1980	81477	München	
Müller	Maria	12.08.1987	81479	München	
Müller	Silja	08.09.1984	67596	Frettenheim	+49/(0)4531/60
Müller	Tania	02.07.1930	09569	Gahlenz	
Müller	Tommy	07.04.1986	81479	München	

Navigieren auf die Seite **Spezifische Daten**.

Unten links finden Sie das Feld **KS-Auslagerungsschacht**. Tragen Sie hier den gewünschten Schacht ein. **Speichern** Sie mit **F1**.

Kontakte > Kunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
Müller	Joel	25.09.1980	81477	München	

Spezifische Daten

Kundenkarte
Kundenkartennummer

Beziehungen
Familie Müller, Joel
gesetzlicher Betreuer

Allgemeine Daten
Bevorzugte Zahlungsart
Backofficekunde
Auswertungsneutral
Kooperationspartner
Teilnahme Verblisterung: Nein
Eingabe von Charge und Verfall für Blisterartikel
Chargendokumentation für Arzneimittel
Doppelmedikations-Check
Zusatzempfehlung
Lagerneutrale Lieferung
KS-Auslagerungsschacht: 3

Krankenversicherung
Kostenträger
Kostenträger-IK
Versichertennummer
Kassenstatus
Zuzahlungsbefreiung bis
Zusatz

Pflegeversicherung
Kostenträger
Kostenträger-IK
Anschrift
Versichertennummer
Genehmigung
ehem. "Pflegekasse"

Botendienst
Bevorzugte Botentour
Lieferhinweis

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Offene Posten Info Kontaktrolle ändern Drucken Genehmig. verwalten
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F10

Zuordnung beim Heim

Für Heime, deren Untereinheiten und Heimbewohner ist die Festlegung in der Heimstruktur vorgesehen. Öffnen Sie das betreffende Heim in den **Kontakten** und wechseln Sie auf der Seite **Struktur** in den Reiter **Kommissionierautomat**.

Bei Auswahl des Heims in der Struktur können Sie die Zuordnung für das gesamte Heim vornehmen.

Kontakte > Heim

Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort	Telefonnummer
Residenz am Blumengarten	Blumenstraße 25	82319	Starnberg	

Struktur Filter

- Residenz am Blumengarten
 - Rosengarten
 - Tulpenwiese
 - Flur A
 - Flur B
 - Waldheim, Domenica


Kommissionierautomat

Eigene Einstellungen
KS-Auslagerungsschacht: 9

Strg Speichern Suchen Neu Filtern Info Kunden-details Drucken Einheit hinzufügen Bewohner anlegen Bewohner zuordnen
Alt F1 F2 F3 F4 F6 F8 F9 F10 F11 F12

Um einer Untereinheit oder einem Bewohner – abweichend von der Einstellung fürs gesamte Heim – einen separaten Auslagerungsschacht zuzuweisen, wählen Sie die entsprechende Untereinheit oder den Bewohner in der Struktur aus.

Im Reiter **Kommissionierautomat** setzen Sie den Haken bei **Eigene Einstellungen** und tragen dann den gewünschten Schacht ein. Bestätigen Sie ihre Einstellungen mit **Speichern – F1**.

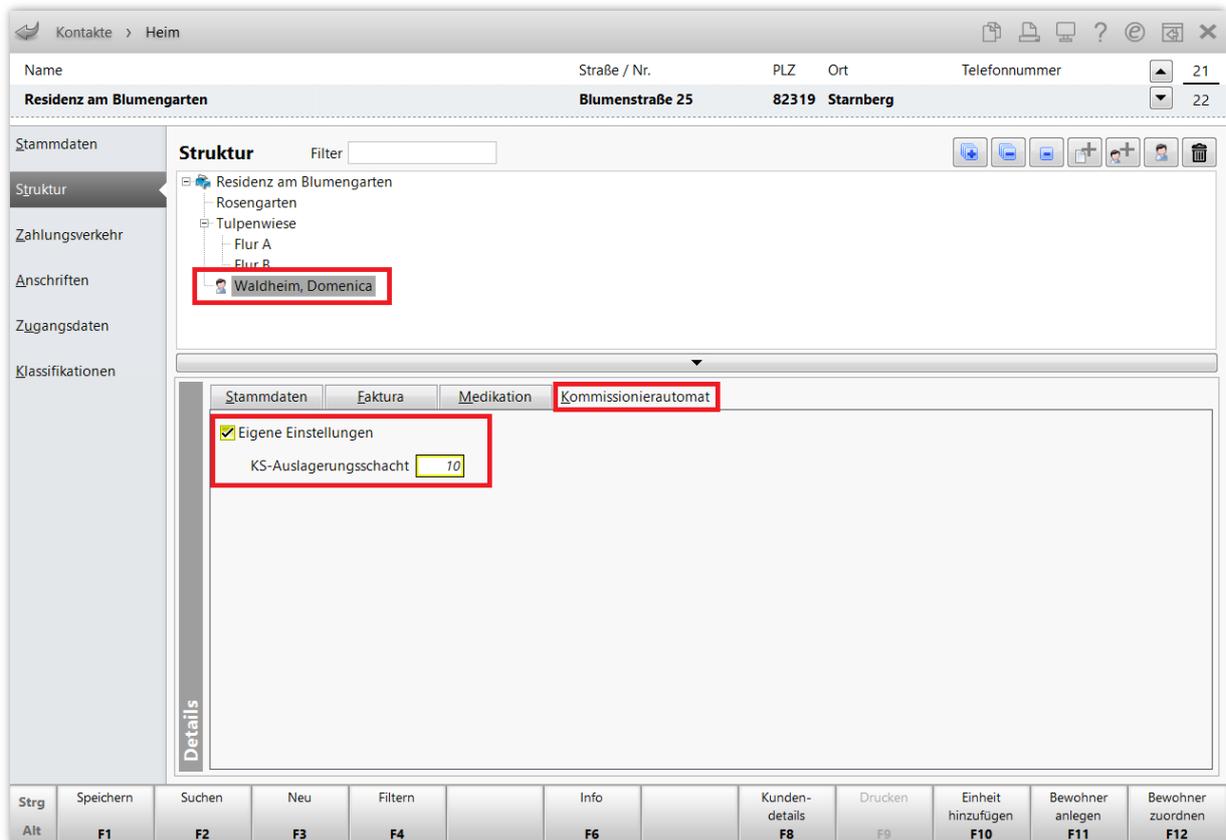

Die kunden- oder heimspezifische Festlegung des Auslagerungsschachtes hat stets Vorrang vor dem arbeitsplatzspezifischen Auslagerungsschacht.

Somit wird die benötigte Ware für bestimmte Kunden oder für die Heimbeflieferung unabhängig vom Arbeitsplatz immer zu Ihren Prozessen passend aus dem Automaten ausgelagert.



Zusatztip: Die Nummer des Auslagerungsschachtes kann auch auf Etiketten aufgedruckt werden, sofern dem betreffenden Kunden oder Heim ein spezieller Schacht zugeordnet ist. Das Druckformular muss dazu die entsprechende Variable beinhalten. Mehr dazu lesen Sie in der [IXOS Onlinehilfe](#).

Prototype Apotheke	Allopurinol 100 Heumann TAB 100 St.
Prototypeheim	PZN: 01234545
Max Mustermann- LangerDoppelname-Verlaengerung	Abgabedatum: 28.04.2022
Station3/Zimmer2	Packung angefangen: _____ Dos: 1 - 0 - 0 - 0 St
	KS: 123